

# TensioMed TensioDay™

Dispositivo ABPM de puntualidad validada



Bluetooth

# 24 horas

Calidad confiable  
**Calidad confiable**




El TensioDay™ ABPM es un dispositivo profesional aprobado y validado con los estándares de la British Hypertension Society y la Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Compacto, confiable, ligero y apto para la comunicación Bluetooth. Gracias a su software de fácil uso crea estadísticas que ayudarán efectivamente en el tratamiento de Hipertensión Arterial.



## Características:

- Comunicación inalámbrica – de uso sencillo y confiable
- Calidad Premium - Validación clínica BHS y AAMI: (A/A)
- Programación sencilla - Por computadora o por dispositivo
- Excelente relación costo-beneficio - Calidad extraordinaria por precio razonable
- Rápido y cómodo – Con un funcionamiento silencioso que ayuda al paciente a relajarse
- 2 años de garantía para el dispositivo, 12 meses para sus accesorios
- Datos generales de la consulta médica u otros datos médicos pueden ser adjuntados al informe – permite el cálculo del factor de riesgo (Framingham)
- Resumen estadístico: promedio, valor mínimo, -máximo, desviación estándar, índice diurno, índice de tiempo (duración) de la hipertensión (porcentaje tiempo elevación PTE), carga de la hipertensión (blood pressure load) y presión promedio arterial
- Adaptabilidad telemedicinal
- Posibilidad de programación de hasta 72 horas
- Almacenaje de 1000 mediciones

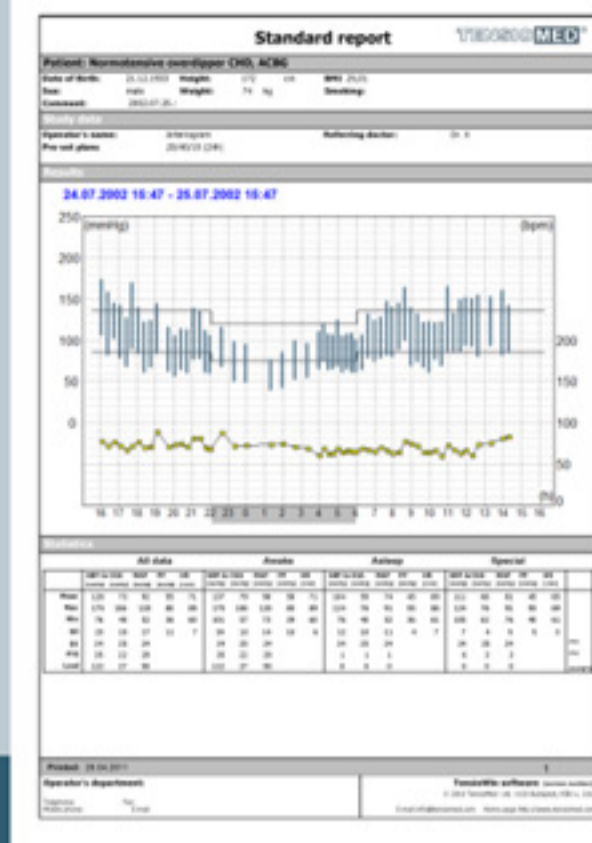

## Posibilidades de uso del software TensioWin™:



- Exportación de datos
- Preparación de informe médico completo
- Análisis completo de los datos
- Envío de datos e informe en forma PDF vía e-mail
- Establecimiento de protocolo personal de paciente
- Composición personal del contenido del informe
- Intercambio de datos entre computadora y dispositivo
- Presentación gráfica de datos en calidad ilustración
- Cálculo de riesgo cardiovascular según factores de riesgo
- Posibilidad de editar el contenido y la presentación de resultados de medición
- Preparación de resúmenes estadísticos y de correlación de los datos registrados
- Mando de dispositivos TensioDay™ ABPM, TensioDay Plus™ y Arteriograph24™

## Contenido del pack de TensioDay™ ABPM:

- Presúmetro ambulatorio de 24 horas
- CD de Instalación del Software TensioWin
- Un manguito de tamaño estándar y uno de tamaño adulto alternativo
- Adaptador Bluetooth
- 4 pilas de larga-vida

### Descripción técnica:

Alimentación eléctrica:	4 pilas AA alcalinas de larga-vida o cargador recargable
Protección contra electrocución:	el dispositivo tiene alimentación eléctrica interna con batería
Clase de protección:	parte de paciente tipo CF
Pantalla:	LCD
Almacenaje de datos:	EEPROM
Intercambio de datos:	Radio, Bluetooth v2.0s
Temperatura de ambiente:	10-40 C
Tamaños:	116x94x47mm
Peso (incl. pilas):	250g

Método de medición:	oscilométrico
Frecuencia de medición:	200 Hz
Rango de medición PS/FC:	presión sanguínea 30-280 mmHg
Precisión estática:	+/- 3 mmHg o 2% del valor de medición
Censor de presión:	censor piezo-resistente
Inflación:	inflador motorizado automático
Seguridad:	Máxima presión de manguito: 280 mmHg
Desinflado:	automático, escalonado

Las especificaciones del dispositivo pueden ser modificadas sin aviso previo. Las especificaciones, instrucciones, advertencias y precauciones actuales están disponibles en el manual de TensioMed TensioDay™.

**TENSIO MED**®

2/e Köér str. 1103 Budapest, Hungary  
Tel: (+36-1)433-1700, (+36-1)433-1701 Fax: (+36-1) 433-1709  
web: www.tensiomed.com e-mail: info@tensiomed.com

Copyright TensioMed Kft. © 2012, All rights reserved



**APLICACIONES MEDICAS**

**Distribuidor Exclusivo**

www.aplirmed.com.ar  
info@aplirmed.com.ar  
(011)-4761-1089

PR-TM-0003ESF